


Montage des interférences lumineuses avec la lampe de Na

Matériel :

- 1 Lampe à vapeur de Na
- 1 Condenseur (N° 309)
- 1 Fente réglable LME (N° 294)
- 1 Lentille +100mm petit diamètre (N° 280)
- 1 Fente d'Young Leybold sur support (N° 324)
- 1 Oculaire à réticule mobile de la salle S 324 (N° 244)
- 1 Caméra flexcam (la bleue)

Montage :



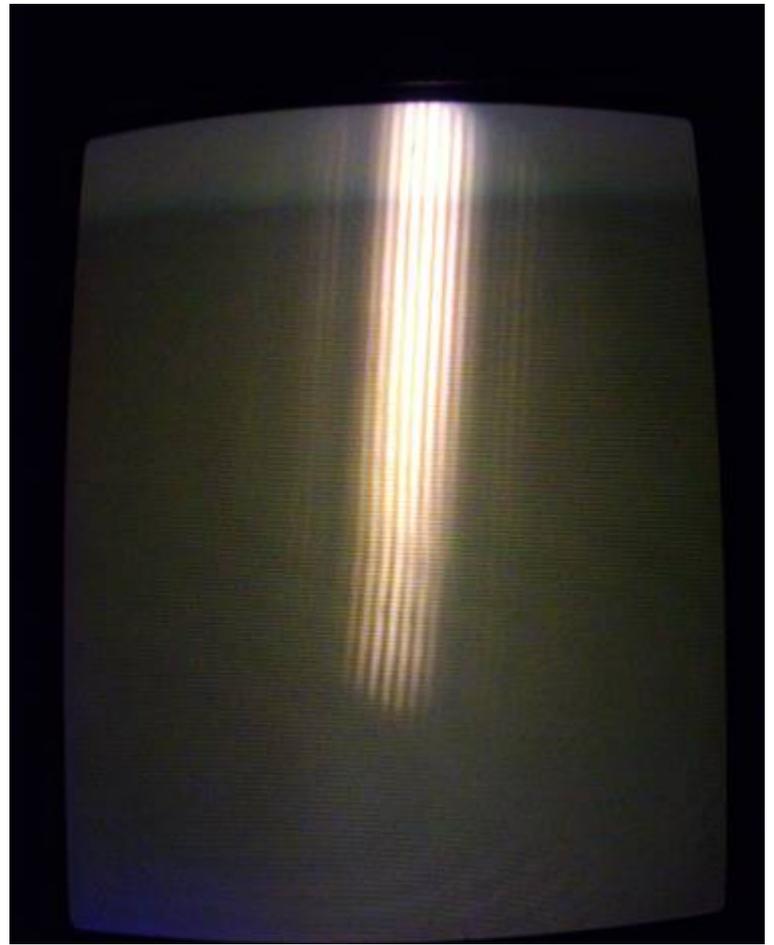

lampe	Condenseur	Fente	Lentille	Fente de	Boy + oculaire + caméra
Na		Réglable	+100 mm	Young	
0	12 cm	24 cm	36 cm	44 cm	65 cm